
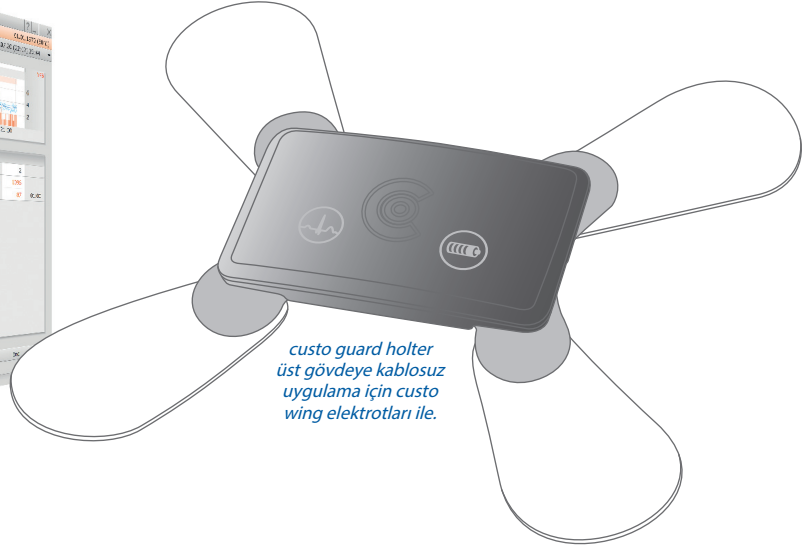


Holter

custo guard holter ve custo diagnostic ile | 120 saate kadar kayıt

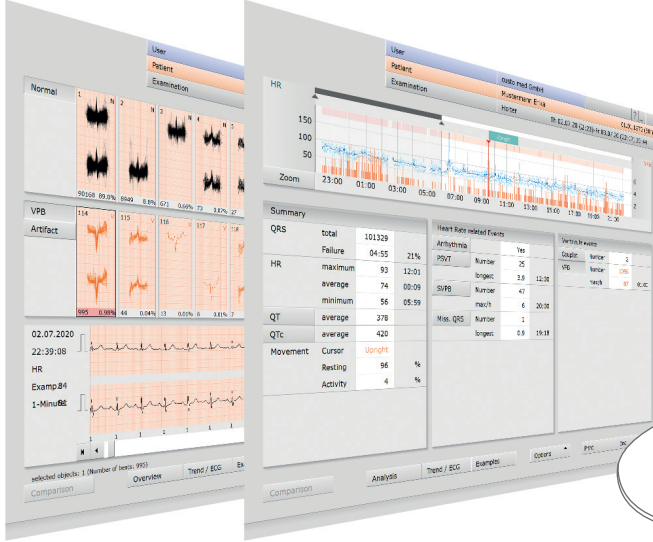

custo guard holter kayıt cihazı


- İki bağımsız derivasyon ile 3 kanal
- Tamamen kablosuz ve hijyenik kullanım için mükemmel
- Kalp pili tanıma
- Bağlam bilgisi için pozisyon ve hareket algılama
- Elektrot uygulamasının PC'de izlenerek kontrolü
- Mobil uygulamalar için Bluetooth Düşük Enerji
- Tek bir pille 120 saate kadar çalışma süresi



EKG kalitesi ve şarj durumu için LED durum göstergesi

custo diagnostic (software)

- Tüm hastaların muayenelerinin karşılaştırılması
- Önceden tanımlanmış metin modülleriyle rahat raporlar
- Açıkça düzenlenmiş A4 kağıt çıktıları
- Kağıtsız tıbbi uygulama: Değerlendirmelerin ve raporların e-posta, faks, PDF ve değerlendirme dosyası (.cst) olarak gönderilmesi
- Mevcut sistemlere çok yönlü bağlantı olanakları BT yapıları (HL7, FDA-XML, SQL, GDT, SCP)

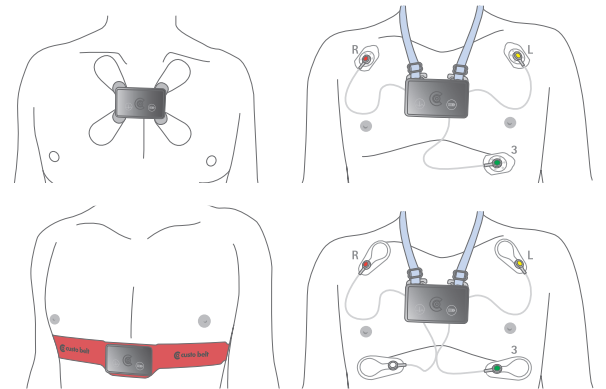

Çeşitli elektrot uygulamaları

Yetkili müşteri temsilciniz

HMH Medikal
Tlf: 0 222 224 24 00
Faks: 0 222 224 27 37
www.hmh-medikal.com.tr
www.customed.com.tr
info@customed.com.tr

Teknik veriler custo guard holter (holter kayıt cihazı)

EKG kanallarının sayısı	3
Örnekleme sıklığı	533 Hz
Çözünürlük	18 Bit
EKG amp.3 dB bant geniş.	0 Hz ... 105 Hz
EKG ölçüm aralığı	+/-685.7 mV
Minimum tespit eşiği	5.51 µV
Radyo frekans bandı	ISM 2.4 GHz
Radyo iletim gücü	10 mW
PC bağlantısı	custo guard taban şarj ve iletişim ünitesi (USB) ve Bluetooth aracılığıyla
Güç kaynağı	Lityum polimer pil
Pil çalışma süresi	120 saate kadar
Pil şarj süresi	Yak. 2 saat, maksimum şarj akımı 80 mA
Durum gösterimi	EKG kalitesi ve şarj durumu için LED ışık göstergeleri
Boyutlar	Yak.70 * 42 * 12 mm (L * W * H)
Ağırlık	Yak. 30 g
Giriş koruma seviyesi	IP 65
Sınıflandırma	Dahili güç kaynağına sahip cihaz, Class IIa, Type BF
Standartlara göre	DIN EN ISO 13485, DIN EN ISO 14971, DIN EN 1041, DIN EN ISO 15223-1, DIN-EN 60601-1, DIN EN 60601-1-2, DIN IEC 60601-1-6, DIN EN 62304, DIN EN 62366-1, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 10993-5, DIN EN ISO 10993-10, DIN EN 60601-2-47, DIN EN 60601-1-11, EN 300 328

Teknik veriler custo guard tabanı (şarj ve iletişim ünitesi)

Tasarım	Tek	Altılı
Güç kaynağı	5 V	5 V
Maksimum şarj akımı	80 mA	6 * 80 mA = max. 480 mA
Boyutlar (L * W * H)	yak. 80 * 49 * 33 mm	yak. 279 * 80 * 33 mm

Aşağıdaki kapsamı

öneriyoruz:

- custo guard holter
- custo guard base 1
- micro-USB cable 2.0
- custo wing adaptor
- custo wing disposable adhesive electrodes
- ECG cable guard 3 or ECG cable guard 4
- Neck strap for ECG cable guard 3/4
- Bluetooth 4.0 USB adapter
- USB extension cable

İsteğe bağlı:

- custo clean CA3 hijyenik çanta custo guard holter için EKG cable guard 3 ile
- custo clean WA3 hijyenik çanta custo guard holter için custo wing adaptör ile

Holter yazılım fonksiyonları

- Kayıt sırasında kalp hızı ve ventriküler olaylarla ilgili olayların tek bakışta görülebildiği net bir başlangıç sayfası
- Şablonların rahat görüntülenmesi ve düzenlenmesi
- EKG örnekleri gibi EKG sinyalinin hızlı değerlendirilmesi ve revizyonu için çok yönlü araçlar
- Olay parametrelerinin bireysel olarak belirlenmesi için detaylı ayar sayfaları
- İsteğe bağlı: ST ölçümü, HRV, AF Tanısı, ANS Tanısı